



折りたたみシャワーベンチ TS／TU取扱説明書

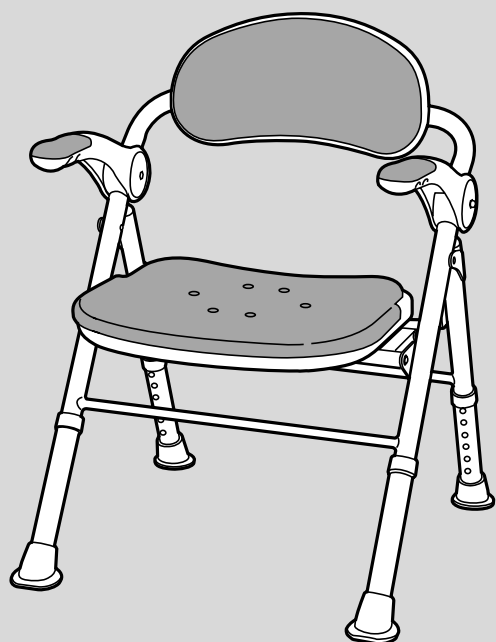

折りたたみシャワーベンチTS

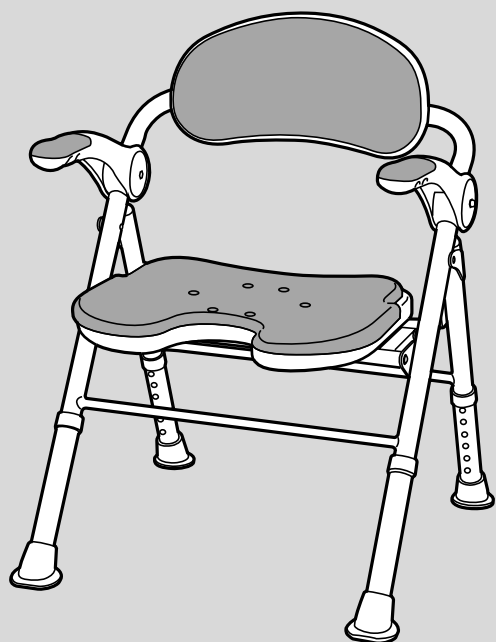

折りたたみシャワーベンチTU

このたびは折りたたみシャワーベンチをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ	3
使いかた	4・5
お手入れの方法	6

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



警告

ひじ掛けを上げ下げする時に、手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。



注意




改造や分解をしないこと
本体が正常にはたらかず、
けがの原因になります。



使用前にネジのゆるみなど各部に異常が
ないか点検し、使用すること
けがをする恐れがあります。

ベンチを折りたたんだり、開いたりする時に、
手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。

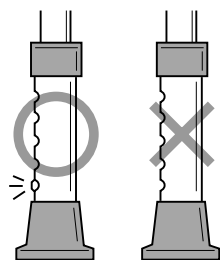

4本の脚部がすべて同じ高
さに設定されており、高
さ調節用のプッシュボタ
ンが確実にセットされて
いるか必ず確認すること
転倒し、けがの原因にな
ります。

必ず平たんで安定した場所で使用すること
転倒し、けがの原因になります。

使用者が自分の身体を
十分に安定させられな
い場合は、必ず
介助者が付き添うこと



各部の調節（高さ調節など）は、お買い
上げの販売店かケアマネージャーなど専
門家に相談すること

使用者の身体状況によっては、
介助者が付き添ったり、お買い上げの販
売店かケアマネージャーなど専門家に相
談すること

使用前に座面裏のロックがしっかりと
かかっていることを確認すること
不意に折りたたまれ、転倒する恐れがあ
ります。



ゴムキャップが外れたまま使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意



本体を踏み台代わり
にして、シャフトに
足をかけたり、座面
やひじ掛けの上に立
ったりしないこと
転倒し、けがの原因
になります。



ベンチに座る時や一
人で立ち上がる時、
片側のひじ掛けだけ
に手をついて支えに
しないこと
転倒し、けがの原因
になります。

背もたれを支えにしての移動や立ち上がりを行わないこと
転倒し、けがの原因になります。

人が座っている状態で本体を持って移動させないこと
本体が破損し、けがの原因になります。


子供を遊ばせる等、
他の用途で使用
しないこと




体重が100kg以上の方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。

各部のなまえ

折りたたみシャワーベンチ TS

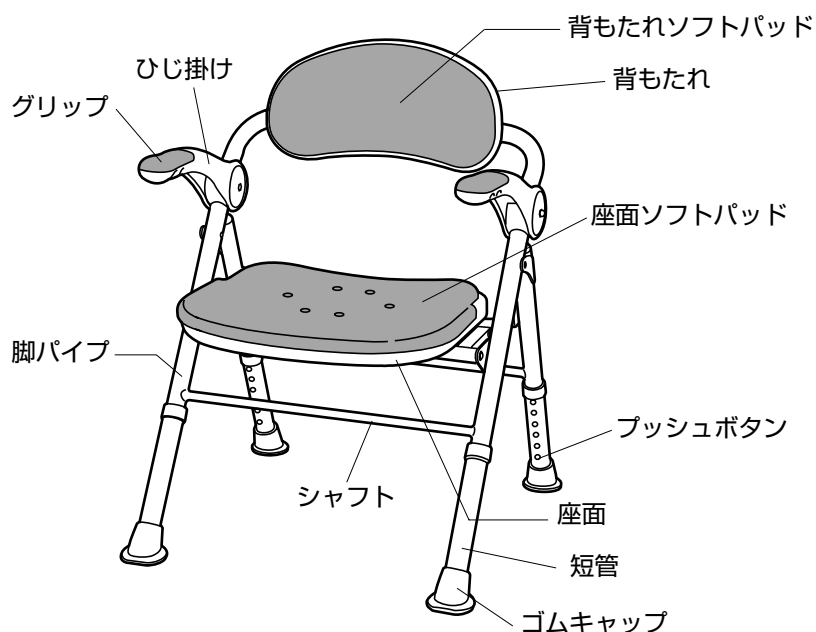




折りたたみシャワーベンチ TU

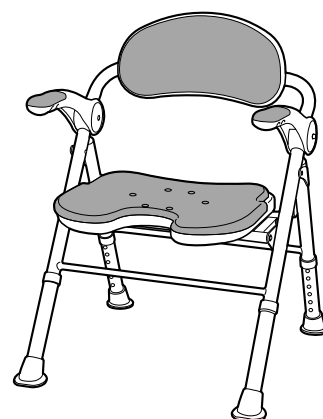

仕様

構成部材	部品名	材質
	座面・背もたれ	ポリエチレン
	ひじ掛け	ポリプロピレン
	グリップ	エラストマー
	ソフトパッド	EVA樹脂
	脚ゴム	合成ゴム
	脚パイプ	アルミニウム
サイズ	イスの状態 幅52×奥行50×高さ67～77cm	
	折りたたんだ状態 幅52×奥行16×高さ80～90cm	
重量	(TS)約5kg／(TU)約4.8kg	
座面までの高さ	35～45cm (6段階調節)	


■サイズ (単位はcm)

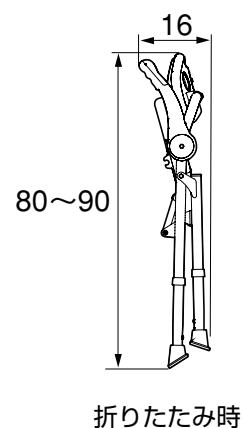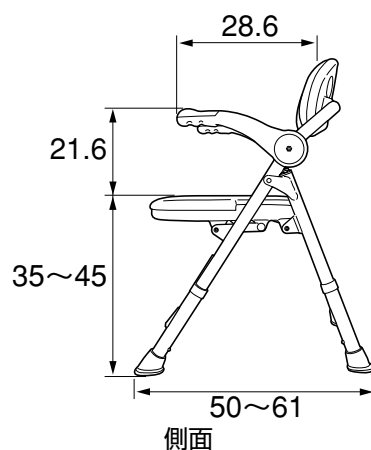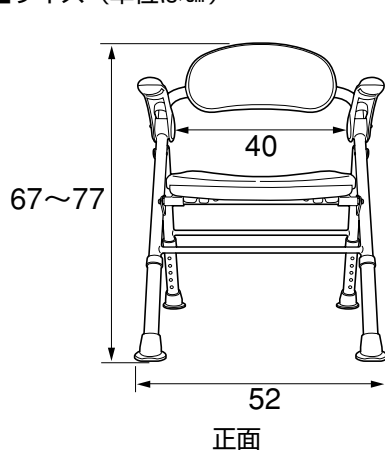

使いかた


イスの状態にセットする

- ①座面を手前に倒し、座面を上から押して「カチッ」と音がすればセット完了です。
- ②必要に応じてひじ掛けを水平になるまでおろします。

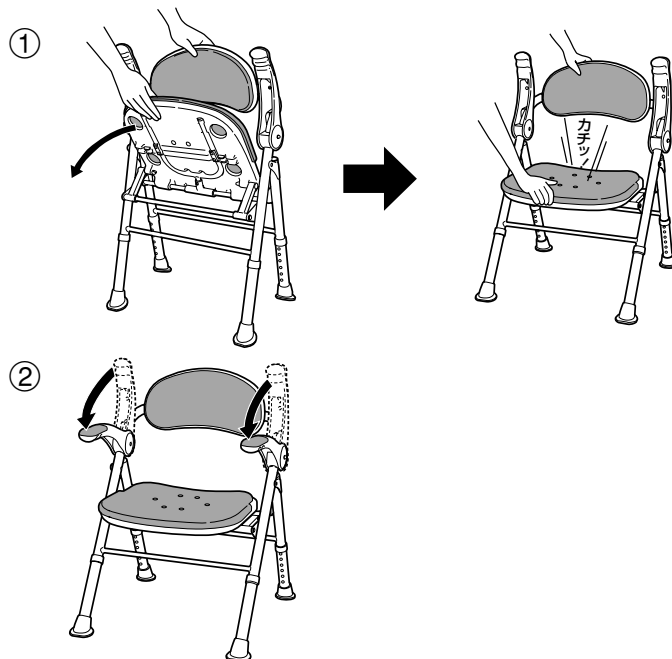

折りたたんだ状態にする

- ①座面を上引き上げればロックが外れ折りたたみができます。
- ②ひじ掛けを上跳ね上げます。

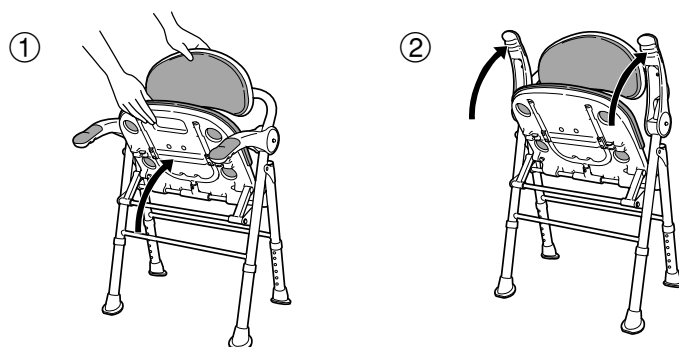

ひじ掛けを上げ下げする時に、手や指をはさまないように十分注意すること



- 折りたたんだり、開いたりする時に手や指をはさまないように十分注意すること
- 座面裏のロックがしっかりとかかっていることを確認すること

座面の高さ調節

座面の高さは6段階（約35～45cm）に調節できます。

※調節は、脚部にある押しボタンを押しながら短管を引いてください。
押しボタンがカチッという音が出て飛び出せば、セット完了です。



4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用の押しボタンが確実にセットされているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。




使いかた

ひじ掛けの使いかた

本体左右のひじ掛けは、必要に応じて上下に可動させることができます。


●ひじ掛けを下ろした状態

立ち座り時に使用者の身体を支えたり、着座時の安定を保つために使用します。

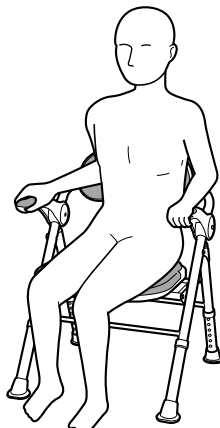


●ひじ掛けを跳ね上げた状態

肘掛けを跳ね上げることで、座ったままで身体を左右に回転させることができます。狭いスペースを有効に使用できたり、移乗をスムーズに行うことができます。

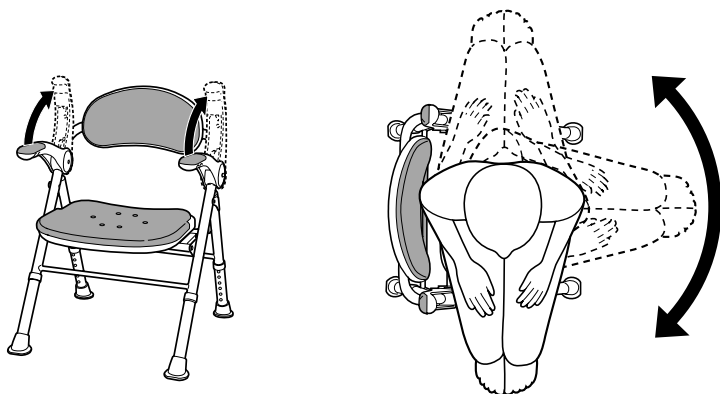

移乗のしかた

浴槽側のひじ掛けを跳ね上げると、座ったまま浴槽に入る動作が行えます。
〈本体のガタツキなどないようお風呂場の排水口等にご注意ください。〉

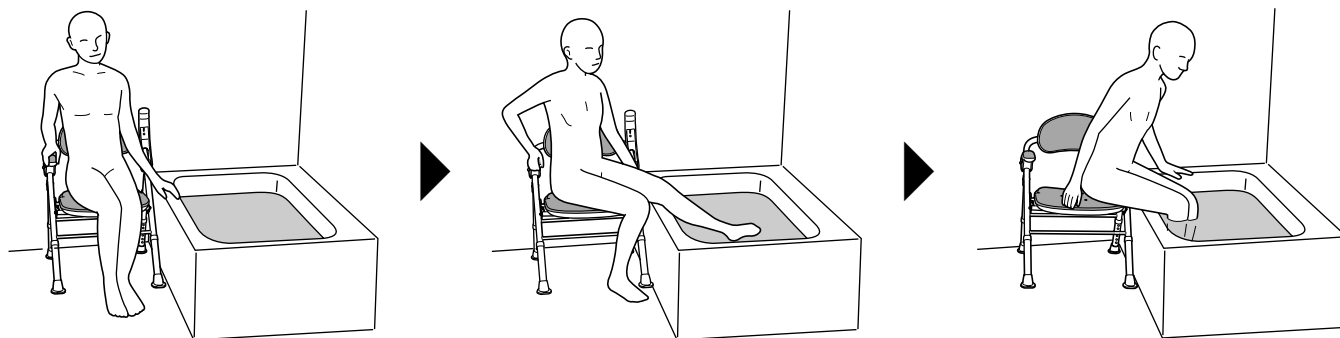

- ベンチに座る時や一人で立ち上がる時、片側のひじ掛けだけに手をつけて支えにしないこと
転倒し、けがの原因になります。
- ひじ掛けを上げ下げする時に、手や指をはさまないように十分注意すること
けがの原因になります。

お手入れの方法


ソフトパッドの着脱方法

1 座面・背もたれソフトパッドの取り外し

座面・背もたれ裏面からソフトパッドの固定脚を押すと、ソフトパッドを取り外すことができます。

2 座面・背もたれソフトパッドの取り付け

ソフトパッド裏面に出ている固定脚を座面・背もたれの穴に合わせ、上からしっかり押えるだけで取り付けすることができます。
(ソフトパッドの前後を間違えないように注意してください。)

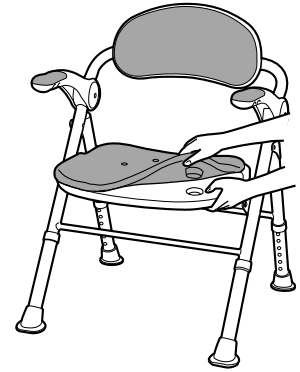

本体及びソフトパッドの洗浄

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。



注意

- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤・酸性・アルカリ・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないこと
- プラスチックが劣化または破損し、けがの原因となることがあります

